

**Zariadenie na terapiu kompresiou
vzduchu**

Model:M1003



Používate ská príru ka

I Zamýšľaná populácia používateľa

Toto zariadenie je určené na používanie dospelými osobami.

I Zamýšľaný používateľ

Zamýšľaným PREVÁDZKOVATEĽOM zariadenia je PACIENT. Aplikovaná časť: Rukávy

I Indikácie na použitie / zamýšľané použitie

Zariadenie na terapiu kompresiou vzduchu je indikované na dočasnú úľavu od menších svalových bolestí a na dočasné zvýšenie cirkulácie v ošetrovaných oblastiach u ľudí, ktorí sú v dobrom zdravotnom stave. Zariadenie na terapiu kompresiou vzduchu simuluje masírovanie a hľadanie tkanív pomocou nafukovacieho odevu.

I Kontraindikácie

Nepoužívajte tento produkt, ak máte zápal, infekciu, bolesť neznámeho pôvodu, krvácanie (vnútorné alebo vonkajšie) v mieste aplikácie alebo v jeho blízkosti, alebo ak máte v mieste aplikácie alebo blízko neho ranu.

Tento výrobok nepoužívajte, ak ste pod dohľadom lekára alebo ak máte stav vyžadujúci použitie akéhokoľvek zdravotníckeho zariadenia

Nepoužívajte tento výrobok na citlivú pokožku.

Nepoužívajte tento produkt, ak máte niektorý z nasledujúcich stavov:

- Akútny pľúcny edém
- Akútna tromboflebitída
- Akútne kongestívne zlyhanie srdca
- Akútne infekcie
- Hlboká žilová trombóza (HŽT)
- Epizódy pľúcnej embólie
- Rany, lézie alebo nádory v mieste aplikácie alebo v jeho blízkosti
- Tam, kde je nežiaduci zvýšený venózný a lymfatický návrat
- Zlomeniny alebo dislokácie kostí v mieste aplikácie alebo v jeho blízkosti
- Prítomnosť arteriálnej nedostatočnosti

I Ved ajší ú inok

Keď je tlak vzduchu príliš vysoký, môžete pociťovať nepohodlie.

I Bezpe nostné opatrenia















Je dôležité, aby ste si prečítali všetky upozornenia a preventívne opatrenia uvedené v tejto príručke, pretože ich cieľom je zaistiť vašu bezpečnosť, zabrániť zraneniu a vyhnúť sa situácii, ktorá by mohla viesť k poškodeniu zariadenia.







Poradte sa s lekárom, ak je používateľ:

- Osoba, ktorá má pľúcny edém, srdcové choroby, rakovinu žíl, vysoký krvný tlak, vysokú horúčku.
- Osoba, ktorá má kožné ochorenie, ako je popálenie kože, dermatitída, preležaniny, hnisavé ochorenie, zhubný nádor atď.

- Osoba, ktorá podstúpila operáciu kože (kožný štep) na ošetrovanej oblasti alebo v jej blízkosti.
- Osoba, ktorá má ochorenie krvných ciev, ako je sériové kórnatenie tepien alebo iná angína, srdcový infarkt atď.
- V prípade podozrenia na prítomnosť krvnej zrazeniny.
- Ošetrovaná oblasť s fyzickou deformáciou alebo vloženými klincami (umelý kĺb, guľôčky, kov atď.)
- Je práve po operácii kŕčových žíl.
- Zotavovanie pacientov po operácii, tehotné ženy, deti.
- V prípade zvýšenej bolesti po použití tohto prístroja.

Upozornenia

	Nepoužívajte, prosím, súčasne s iným lekárskeým vybavením a implantátmi na lekárske ošetrenie, ako je kardiostimulátor; umelé srdce a pod., kvôli bezpečnosti. Užívateľia s príliš vysokým krvným tlakom alebo prekážkou v krvnom obehú ho tiež nesmú používať.		Na napájací kábel nekladte ťažké predmety. Taktiež ho neprítlačte stólom alebo stoličkou. Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom, únik elektrického prúdu alebo požiar.
	Pri pripájaní alebo odpájaní napájacieho kábla zo zásuvky ho vytiahnite suchými rukami. Ináč to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.		Pri používaní týchto rukávov si oblečte niečo na seba, aby ste sa vyhli priamemu kontaktu medzi pokožkou a rukávami.
	Pri používaní týchto rukávov si oblečte niečo na seba, aby ste sa vyhli priamemu kontaktu medzi pokožkou a rukávami.		Nepoužívajte ho v prostredí s príliš veľkým množstvom elektromagnetických vln. Môže to spôsobiť poruchu zariadenia a úraz používateľovi.
	Dávajte pozor, aby sa do zariadenia nedostala voda alebo iné látky, neponárajte zariadenie do vody.		Počas používania tohto zariadenia sa nepokúšajte chodiť ani sa pohybovať
	Ak ste zariadenie dlhší čas nepoužívali, alebo ak ho chcete používať v chladnom prostredí. Zariadenie nemusí fungovať normálne. V takom prípade použite prístroj po troch alebo štyroch použitiach s rôznym tlakom.		Pri čistení zariadenia sa dôsledne riadte pokynmi na čistenie, ktoré sú vysvetlené v tomto návode, inak môže dôjsť k vonkajšiemu poškodeniu produktu, ako je napríklad zmena farby.
	Zapojte zariadenie do elektrickej zásuvky samostatne, nezapájajte iné zariadenia do rovnakej zásuvky, aby ste ich mohli použiť naraz, pretože hrozí nebezpečenstvo požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo iných zranení.		Ak toto zariadenie nefunguje správne alebo nefunguje vôbec, nepokúšajte sa otvárať, opravovať alebo rozoberať hlavnú jednotku alebo toto zariadenie, pretože hrozí nebezpečenstvo požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia používateľa.
	Pri prvom použití používajte toto zariadenie na najnižších nastaveniach a pomaly zvyšujte čas ošetrenia a tlak podľa svojich potrieb a pocitu. Ak ho budete používať nepretržite dlhší čas, môže to u vás vyvolať opačný efekt.		Vzduchová hadica nesmie byť skrútená ani ohnutá

	Toto zariadenie nepoužívajte, ak pociťujete zápal, infekciu, bolesť neznámeho pôvodu alebo krvácanie (vnútorné alebo vonkajšie) v blízkosti ošetrovanej polohy.		Rukávy neperte v práčke ani ich neponárajte do vody. Pri ich čistení postupujte podľa pokynov v tomto návode.
	Ihneď prestaňte prístroj používať, keď cítite bolesť alebo sa necítite pohodlne. Pri zapínaní rukáva buďte opatrní, pretože sa do zipsu môže zaseknúť oblečenie, vlasy alebo pokožka.		Skontrolujte vhodné napätie pre použitie tohto zariadenia. V opačnom prípade môže dôjsť k poruche funkcie, úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo zraneniu
	Nepoužívajte na iný účel ako masáže. Uchovávajte ho mimo dosahu dojsť a detí kvôli riziku úrazu elektrickým prúdom alebo iných zranení.		
	Toto zariadenie nebolo testované na použitie v prostredí MR a nemalo by sa používať vystavené prostrediu MR, keď majú pacienti na sebe toto zariadenie. Udržujte ho mimo miestnosti so skenerom MRI. Zariadenie používajte podľa pokynov lekára alebo v súlade s návodom na použitie.		

Upozornenia

- Zariadenia ME nie sú servisované ani udržiavané počas používania u pacienta.
- Zákaz sedenia a šliapania na zariadenie, Zákaz stláčania alebo rozoberania zariadenia.
- Pri náhradnom príslušenstve majte na pamäti, že by sa mali používať iba originálne diely od výrobcu.
- Sieťová zástrčka sa používa ako prostriedok izolácie od sieťového napájania. Neumiestňujte zariadenie tak, aby bolo ľahké odpojiť sieťovú zástrčku zo zásuvky.
- Zabráňte škrteniu v dôsledku napájacieho kábla a spoločnej vzduchovej hadice.
- Udržujte zariadenie mimo dosahu domácich zvierat, škodcov alebo detí, aby ste predišli neúmyselnému zničeniu.
- Zariadenie dobre skladujte, aby ste predišli zrýchlenému starnutiu spôsobenému vlákňami, prachom a snečným žiarením
- Porucha snímača teploty povedie k prehriatiu plášt'a.
- Porucha snímača tlaku povedie k zvýšeniu tlaku vzduchu.

UPOZORNENIE: Používanie mikrovlnnej rúry, vysokofrekvenčného chirurgického zariadenia, zobrazovania magnetickou rezonanciou alebo iného rádiového žiarenia v blízkosti tohto produktu môže spôsobiť poruchu alebo viesť k strate základného výkonu, čo znamená, že bude ovplyvnená presnosť merania.

UPOZORNENIE: Je potrebné sa vyhnúť používaniu tohto zariadenia v blízkosti alebo naskladaného s iným zariadením, pretože by to mohlo viesť k nesprávnej prevádzke. Ak je takéto použitie nevyhnutné, toto zariadenie a ostatné zariadenia by sa mali pozorovať, aby sa overilo, či fungujú normálne.

UPOZORNENIE: Prenosné vysokofrekvenčné komunikačné zariadenie (vrátane periférnych zariadení, ako sú anténne káble a externé antény) by sa nemalo používať vo vzdialenosti menšej ako 30 cm (12 palcov) od akejkoľvek časti zariadenia na terapiu kompresiou vzduchu, vrátane káblov špecifikovaných výrobcom. V opačnom prípade môže dôjsť k zníženiu výkonu tohto zariadenia.

UPOZORNENIE: Použitie iného príslušenstva, prevodníkov a káblov, ako sú špecifikované alebo poskytnuté výrobcom tohto zariadenia, môže viesť k zvýšeným elektromagnetickým emisiám alebo zníženiu elektromagnetickej odolnosti tohto zariadenia a viesť k nesprávnej prevádzke.

Zoznam káblov a maximálna dĺžka káblov je nasledovná:

Názov kábla	Dĺžka kábla	Či má tienenie
Napájací kábel	1.8m	Nie

Pozor:

Zariadenia na zabezpečenie, ochranu proti krádeži a rádiodrekvenčnú identifikáciu (RFID). Niektoré elektromagnetické systémy proti krádeži a detektory kovov, ako sú tie, ktoré sa používajú pri vchodoch alebo východoch obchodných domov, knižníc a iných verejných miest, a bezpečnostné zariadenia na letiskách môžu ovplyvniť zariadenie na kompresiu vzduchu. Okrem toho zariadenia RFID, ktoré sa často používajú na čítanie identifikačných štítkov, ako aj niektoré zariadenia na deaktiváciu štítkov, ako sú zariadenia používané pri platobných priehradkách v obchodoch a výpožičných pulloch v knižniciach, môžu tiež ovplyvniť zariadenie na terapiu kompresiou vzduchu. Zariadenie na terapiu kompresiou vzduchu v blízkosti týchto miest, prosím, nepoužívajte. Ak musíte prejsť cez jedno z týchto zariadení, vypnite zariadenie na liečbu kompresiou vzduchu. Pred každým použitím skontrolujte stav zariadenia na terapiu kompresiou vzduchu, aby ste sa uistili, že funguje normálne.

Používanie krátkovlnnej diatermie, mikrovlnnej diatermie alebo terapeutické ultrazvukovej diatermie (všetky teraz označované ako diatermia) a elektrokauterizačných zariadení v blízkosti tohto produktu môže spôsobiť poruchu alebo viesť k strate základného výkonu, nepoužívajte, prosím, v blízkosti týchto zariadení zariadenie na terapiu kompresiou vzduchu. pri každom použití, pozorujte zariadenie, aby ste si overili, či funguje normálne.


Ak počas používania pociťujete silnú bolesť, akékoľvek nezvyčajné príznaky alebo chcete v prípade núdze odstrániť tlak:

- Zastavte zariadenie stlačením tlačidla pohotovostného režimu.
- Odpojte konektor vzduchovej hadice od hlavnej jednotky alebo od manžety nôh.
- Odstráňte manžety z končatín.
- V prípade potreby sa okamžite poraďte so svojim lekárom.

I Opis produktu

Výrobok sa skladá hlavne z hlavnej jednotky, manžiet na nohy a kĺbových vzduchových hadíc atď.


•Hlavná jednotka

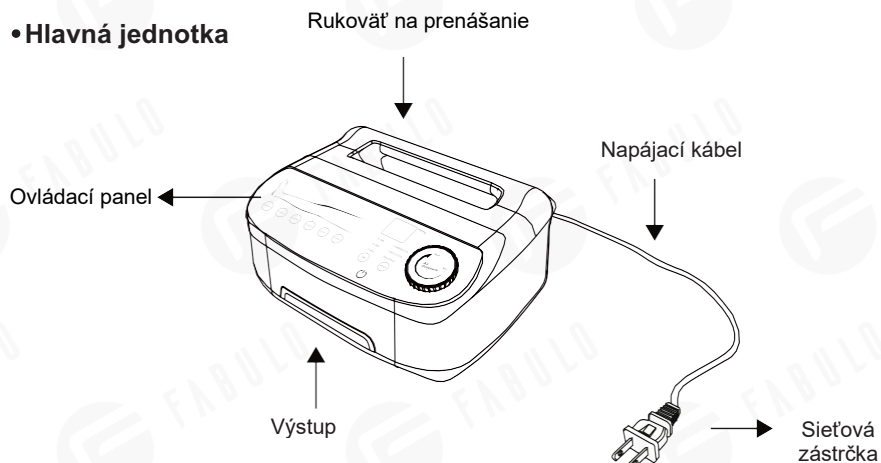

4

Č.	Názov	Použitie
1	Ovládací panel	Používateľské rozhranie pre používateľa na obsluhu zariadenia; zobrazenie informácií o liečbe.
2	Výstup vzduchu	Používa sa na pripojenie hadicovej spojky.
3	Sieťová zástrčka	Používa sa na pripojenie zásuvky striedavého napájania.
4	Napájací kábel	Kábel, ktorý prenáša prúd do hlavnej jednotky
5	Rukoväť na prenášanie	Rukoväť, vhodná pre používateľov na presúvanie zariadenia.


• Príslušenstvo

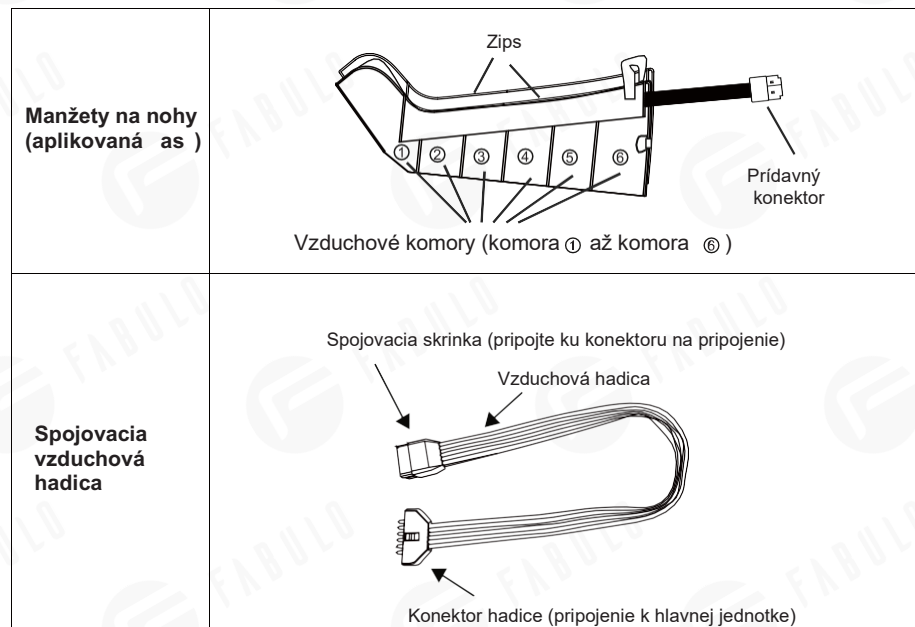

Č.	Názov	Použitie
1	Prídavný konektor	Používa sa na pripojenie k spojovacej skrinke spojovacej vzduchovej hadice
2	Zips	Pred použitím zapnite zips, aby manžeta mohla ovinúť nohy
3	Vzduchové komory	Časť, kde sa nafukuje a vyfukuje vzduch, 6 vzduchových komôr pre každú manžetu na nohy.
4	Spojovacia skrinka	Používa sa na pripojenie k prípojnému konektoru manžety na nohy.
5	Vzduchová hadica	Hadica, ktorá prenáša vzduch do vzduchových komôr.
6	Hadicová spojka	Používa sa na pripojenie k výstupu vzduchu hlavnej jednotky.

5

• Ovládací panel hlavnej jednotky

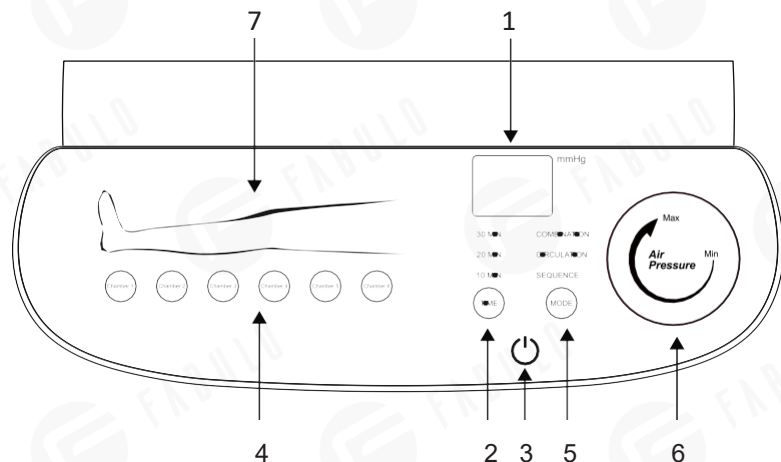

Č.	Názov	Návod na použitie
1	LED obrazovka	<ul style="list-style-type: none"> • Režim nastavenia displeja: Keď stlačíte tlačidlo "Mode", zobrazí sa režim nastavenia (P1 alebo P2 alebo P3) na 2 sekundy; • Zobrazená hodnota tlaku: 2 s po stlačení tlačidla režimu sa automaticky prepne na zobrazenie aktuálnej hodnoty tlaku vzduchu (50~199 mmHg).
2	Tlačidlo Time (Čas)	Vyberte si čas masáže: Je možné zvoliť 10/20/30 minút. Každé časovanie má svoj vlastný indikátor (indikátor 10 min/20 min/30 min).
3	Tlačidlo pohotovostn. režimu	Zapnite/vypnite hlavnú jednotku
4	Tlačidlo 1. komory až 6. komory	Tlačidlo ovládania miesta ošetrenia (Tlačidlo Komory 1, Komory 2, Komory 3, Komory 4, Komory 5, Komory 6 ovláda príslušné miesto ošetrenia od chodidla po stehno)
5	Tlačidlo Režim Indikátory režimu	Ak chcete vybrať režim. Celkovo 3 indikátory (sekvenčný režim, cirkulačný režim, kombinovaný režim)
6	Gombík Tlak	Nastavte úroveň tlaku: otočte doľava, tlak sa zníži, otočte doprava, tlak sa zvýši
7	Schéma miest ošetrenia	Šesť modrých indikátorov označujúcich príslušnú polohu ošetrenia.

• Všeobecné špecifikácie zariadenia

Názov výrobku:	Zariadenie na terapiu kompresiou vzduchu	Model	M1003
Rozmery (hlavná jednotka)	D258mm/Š192mm/V119mm	Hmotnosť (so všetkým príslušenstvom)	3.5KG
Rozsah tlaku	50~199mmHg	Napájanie	Vstup AC: 100~240 Voltov 50/60HZ, 1.0A Max
Spotreba energie	35w	Počet komôr	6 komôr
Režim prevádzky	Nepretržitá prevádzka	Režim	3 režimy

Proti úrazu elektrickým prúdom	Aplikovaná časť	Liečebná poloha	Chodidlá, lýtky, kolena a stehná
Doba liečby	10/20/30 minút	Materiály schránky	ABS
Veľkosť manžety	D1015mm* Š 380MM		
Prevádzkové podmienky	Teplota: +5° C až 40° C; Atmosferický tlak : 75 kPa až 106 kPa; Vlhkosť : 5 % až 90 % bez kondenzácie		
Podmienky Skladovania	Teplota: -20° C až 55° C; Atmosferický tlak : 75 kPa až 106 kPa; Vlhkosť : 5 % až 90 % bez kondenzácie. Uchovávať v suchu a vyhýbať sa priamemu slnečnému žiareniu.		

I Ako používa


• Nastavte systém

Krok 1: Stiahnite zips na manžete, potom si dajte celú nohu dovnútra a dobre si nohy obopnite zipsom.

Medzi rukávmi nie je ľavo-pravý rozdiel.



Krok 2: Zapojte „konektor pripojenia“ manžety na nohy do „konektora spojovacej skrinky“ vzduchovej hadice spoja; potom správne zapojte „konektor hadice“ vzduchovej hadice spoja do „Výstupu vzduchu“ hlavnej jednotky.
Poznámka: Zaznie to trochu ako „Dá“, keď úplne zapojíte konektor hadice do hlavnej jednotky.

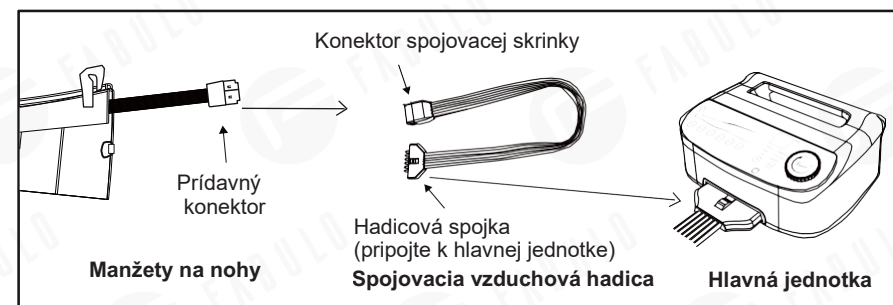

Krok 3: Zapojte sieťovú zástrčku hlavnej jednotky do sieťovej zásuvky (napájací zdroj).

Krok 4: Stlačením tlačidla „Standby“ na hlavnej jednotke spustíte masáž.

• Začne sa sekvenčným režimom a tlakom vzduchu 50 mmhg (najnižší), predvolene 10-minútové časovanie. Ak nie je zvolené žiadne časovanie, automaticky sa vypne po 10 minútach liečby (- možno manuálne reštartovať zariadenie).


• Vyberte režim

Stlačením tlačidla „Mode“ prepnete a vychutnáte si rôzne masážne režimy, na LED obrazovke sa po stlačení tlačidla režimu na 2 sekundy zobrazí režim výberu (sekvenčný režim: zobrazenie P1, cirkulačný režim: zobrazenie P2, kombinovaný režim: zobrazenie P3) a príslušný LED indikátor bude blikať.


Režim nastavenia počas prevádzky nespôsobí opätovné spustenie časovania.

Postupnosť masáže každého režimu je nasledovná:


Režim1: Sekvenčný režim

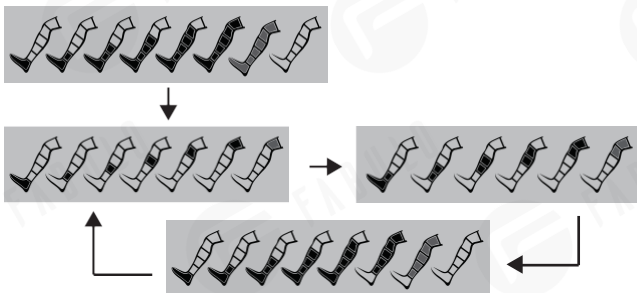

Režim 2: Cirkulačný režim

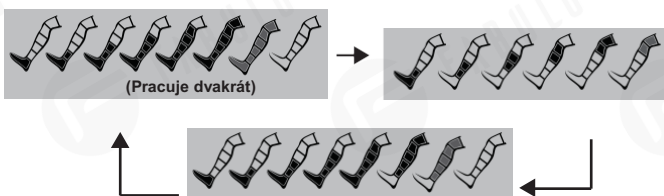

Režim 3: Kombinovaný režim

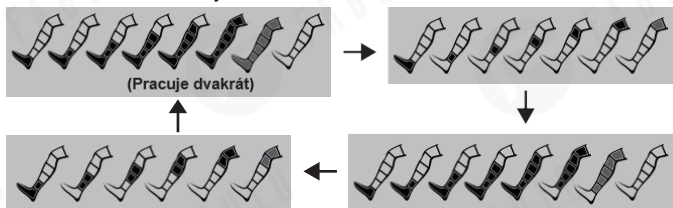

• Vyberte oblasť ošetrovania

Stlačením tlačidla „Komora 1“, „Komora 2“, „Komora 3“, „Komora 4“, „Komora 5“ alebo „Komora 6“ nastavíte alebo znova spustíte masáž príslušných komôr.

Indikátor bude blikať, keď jeho pridružená komora funguje. Keď komora prestane fungovať, jej indikátor zostane zhasnutý;

Všetky komory fungujú štandardne, keď je prístroj zapnutý, všetky indikátory ošetrovaných oblastí svietia po zapnutí hlavnej jednotky trvalo modrým svetlom;

Úprava ošetrovanej oblasti počas liečby nevedie k opätovnému spusteniu načasovania.

Úprava ošetrovanej oblasti nenaruší postupnosť režimu, ošetrovaná oblasť, ktorá nie je zvolená, bude v postupnosti pracovného procesu preskočená.

Poznámka: Hlavná jednotka sa automaticky vypne po 1 minúte, keď sú vypnuté všetky komory.

• Nastavenie intenzity a času

Nastavenie času:

Stlačte tlačidlo „Time“ na výber prevádzkového časovania od 10/20/30 minút, LED indikátor použitého časovania bude ukazovať stále modré svetlo. Po nastavení počas prevádzky sa časovanie znova začne počítať od nuly





Nastavenie intenzity:

Otočením gombíka tlaku nastavíte intenzitu tlaku. K dispozícii je rozsah tlaku vzduchu 50~199 mmhg. Otočte doľava, tlak klesá, najnižší tlak vzduchu je 50 mmhg, otáčajte doprava, tlak sa zvyšuje, najvyšší tlak vzduchu je 199 mmhg (zvýšenie alebo zníženie o 10 mmhg). Pri prvom použití sa odporúča zvoliť najnižšiu hodnotu a potom ju pri ďalšom použití upraviť podľa osobných preferencií.

Úprava intenzity tlaku počas liečby nemá za následok opätovné časovanie.

• Ukončenie ošetrovania

Prístroj sa po uplynutí doby ošetrovania automaticky vypne, alebo môžete liečbu kedykoľvek zastaviť stlačením tlačidla „Standby“.

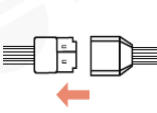	Keď skončíte s používaním, vyťahnite zástrčku hlavnej jednotky zo zásuvky. Upozornenie: Pri vyťahovaní napájacej zástrčky alebo konektora ich ťahajte za zástrčku, nie za kábel.
	Odstráňte konektor z hlavnej jednotky.
	Odstráňte dva prídavné konektory zo spojovacej skrinky.
	Hlavnú jednotku a všetky diely uchovávajte v škatuli.

I Pokyny na istenie zariadenia

PRÍ ČISTENÍ PRÍSTROJA NEZABUDNITE VYPNÚŤ NAPÁJANIE.

Po ošetroení utrite 3-krát vnútornú a vonkajšiu stranu manžiet nôh čistou bavlnenou mäkkou handričkou namočenou vo vode, potom ju utrite 3-krát čistou bavlnenou mäkkou handričkou namočenou v 75% alkohole, zakaždým nie kratšie ako 10 sekúnd; nakoniec ho ešte 3x utrite čistou bavlnenou mäkkou handričkou namočenou vo vode, nechajte prirodzene vyschnúť.

Upozornenia:

- Na utieranie prístroja nepoužívajte benzín, riedidlo ani iné dráždivé kvapaliny, v opačnom prípade, by to spôsobilo poruchu alebo by sa súčasti poškodili alebo zmenili farbu.
- Nevystavujte zariadenie vlhkosti alebo vlhku. Zariadenie nedržte pod tečúcou vodou, neponárajte ho do vody ani iných tekutín.
- Dbajte na to, aby do prístroja nevnikla voda. Ak k tomu niekedy dôjde, použite zariadenie znova až po úplnom vyschnutí.
- Prístroj nečistite počas liečby, uistite sa, že je prístroj pri čistení vypnutý.

I Skladovanie

Prístroj skladujte na chladnom, dobre vetranom mieste. Ak chcete zariadenie uskladniť na dlhší čas, vložte ho do pôvodnej krabice.

Neskladujte zariadenie pri príliš nízkej teplote alebo vo vlhkých miestach z dôvodu možnosti zamrznutia a poškodenia funkčnosti. Dbajte na podmienky skladovania uvedené v tomto návode.

Neskladujte odevy v blízkosti sporáka, cigariet alebo iných zdrojov tepla kvôli riziku požiaru. Neskladujte odevy v blízkosti ihiel, nožníc alebo iných ostrých predmetov, pretože hrozí nebezpečenstvo poškodenia odevov.

Zabráňte priamemu slnečnému žiareniu a udržiajte zariadenie mimo vykurovacieho zariadenia vrátane plynového sporáka kvôli možnosti zafarbenia a poruchy. Nekladte naň ťažké veci.

I Likvidácia



Na konci životného cyklu výrobku nevyhadzujte tento výrobok do bežného domového odpadu, ale odneste ho na zberné miesto pre recykláciu elektronických zariadení. Odpad z elektrických a elektronických zariadení môže mať potenciálne škodlivé účinky na životné prostredie. Nesprávna likvidácia môže spôsobiť hromadenie škodlivých toxínov vo vzduchu, vode a pôde a môže byť škodlivá pre ľudské zdravie, ste povinní zariadenie správne zlikvidovať. Zneškodnite na verejnom zbernom mieste v krajinách EÚ — Smernica 2002/96/EC WEEE. Informácie o likvidácii vám poskytne váš obecný úrad alebo predajca.





I Riešenie problémov

Problémy	Príčiny a Riešenia
1. Nefunguje a kontrolka nesvieti	1. Skontrolujte, či je zariadenie zapojené. 2. Zapnite hlavný vypínač. 3. Skontrolujte, či napájací kábel funguje správne, (skontrolujte napätie) 4. Skontrolujte, či načasovanie liečby skončilo. (Ak áno, reštartujte stlačením tlačidla napájania.)
2. Manžety sa vzduchom nenafukujú alebo nemajú žiadny tlak.	1. Funguje iba vtedy, keď sú k ovládaču pripojené 2 vzduchové hadice. 2. Skontrolujte, či konektory hadice nie sú skrútené alebo stlačené ťažkými predmetmi. 3. Skontrolujte, či sú všetky pripojenia konektorov alebo zástrčky správne a stabilné.
3. Ak to znie ako únik vzduchu.	1. Skontrolujte, či sú hadicové spojky úplne a správne zasunuté. 2. Skontrolujte, či nie sú spojky hadíc stlačené, skrútené alebo ohnuté. Skontrolujte, či nie sú spojky hadice poškodené
4. Náhle prerušenie prevádzky.	1. Napájací kábel alebo vzduchové hadice vypadnú; Prístroj sa po ukončení ošetrovania automaticky vypne
5. Tlak je príliš slabý alebo príliš silný.	1. Nastavte gombík tlaku, aby ste zvolili správnu úroveň intenzity. 2. Vypnite zariadenie, ak neznesiete silu.
6. Hlavná jednotka sa zahrieva	Je normálne, ak sa hlavná jednotka po príliš dlhom používaní zahrieva. Odporúčame ju vypnúť na 10 minút.

I Obsah balenia

2 x manžety na nohy, diel č.: M1003-cuff
 1 x Spojovacia vzduchová hadica, diel č.: M1003-air tube
 1 x Hlavná jednotka, M1003
 1 x Používateľská príručka

I Popis symbolov

	Všeobecné výstražné znamenie.		Výrobok by mal byť umiestnený zvisle nahor
	Aplikovaná časť typu BF		Limit počtu 5 vrstiev
	Dátum výroby		Tlačidlo pohotovostného režimu
	Sériové číslo		Typ ochrany pred úrazom elektrickým prúdom: Trieda II
	Skladujte v suchu		Informácie o výrobcovi: Názov a adresa výrobcu
	Pozrite si návod na použitie.		Kód šarže
	Zaveste na vysušenie		Nepoužívajte žehličku
	Chemické čistenie nie je povolené.		Nebieliť
	Horné teplotné limity (55 °C) a spodné limity (-20 °C), ktorým môže byť zdravotnícke zariadenie bezpečne vystavené		
	Rozsah atmosférického tlaku (horný limit: 75Kpa , Spodný limit : 106Kpa), ktorým môže byť zdravotnícka pomôcka bezpečne vystavená.		
	Rozsah vlhkosti (horný limit : 90 % RH , Dolná hranica : 5 % RH), ktorým môže byť zdravotnícke zariadenie bezpečne vystavené.		
	Likvidácia v súlade so smernicou 2002/96/ES (WEEE)		
	Toto zariadenie nebolo testované na použitie v prostredí MR a nemalo by sa používať vystavené prostrediu MR, keď majú pacienti na sebe toto zariadenie. Udržujte ho mimo miestností so skenerom MRI.		